


Livia 3,5 Fr Harnkatheter


für die Anwendung bei Früh- & Neugeborenen und Kindern



3,5 Fr Harndrainagekatheter
Seite 02

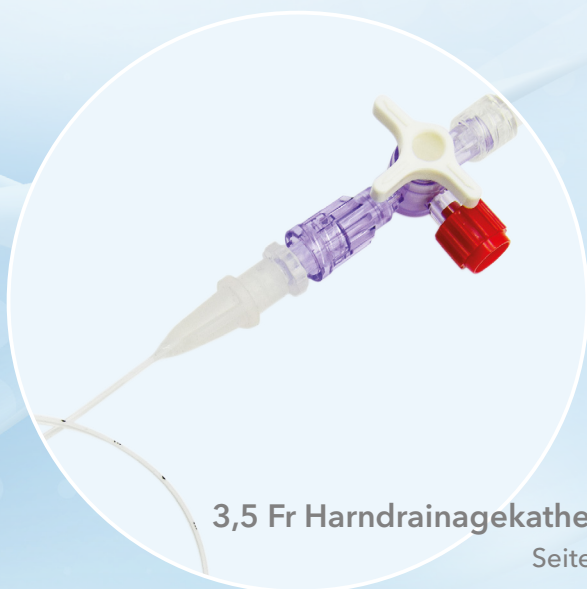

Harnkatheter-Set
Seite 03

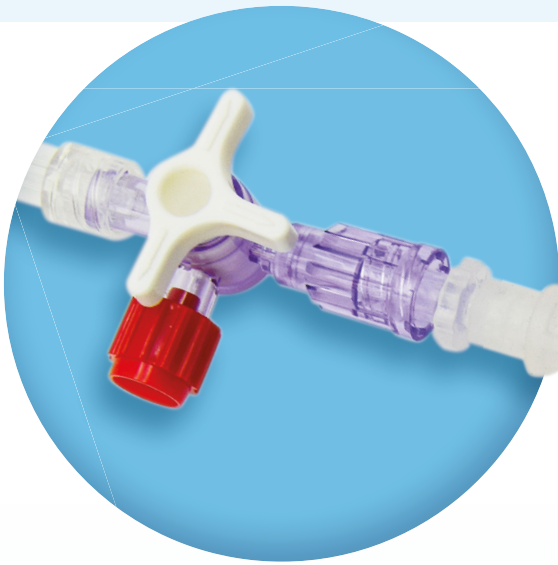

Livia 3,5 Fr Harnkatheter


Der 3,5 Fr Livia Harnkatheter (Ø 1,2 mm) ist ein medizinisches Produkt, das speziell für die Anwendung bei Frühgeborenen entwickelt wurde. Mit dem Harnkatheter wird die Urinausscheidung des Frühgeborenen präzise gemessen und eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt.

Der 3,5 Fr Livia Harndrainagekatheter wird verwendet, um Urinkulturen und genaue Urinausscheidungen bei Neugeborenen und Kindern zu erhalten. Diese bevorzugte Harnableitungsmethode eliminiert die Unannehmlichkeiten und Messfehler, die mit dem Wiegen von Windeln verbunden sind. Der Harnkatheter ist ein geschlossenes Harnableitungssystem mit Silikonelastomer-Harnröhrenkatheter, der zur präzisen Urinausscheidung bei Neugeborenen und Kindern verwendet wird.

Merkmale:

Der Silikonkatheter hat eine weiche, abgerundete Spitze und eine nicht benetzbare Oberfläche, um Traumata beim Einführen zu reduzieren.

Das biokompatible, nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung.

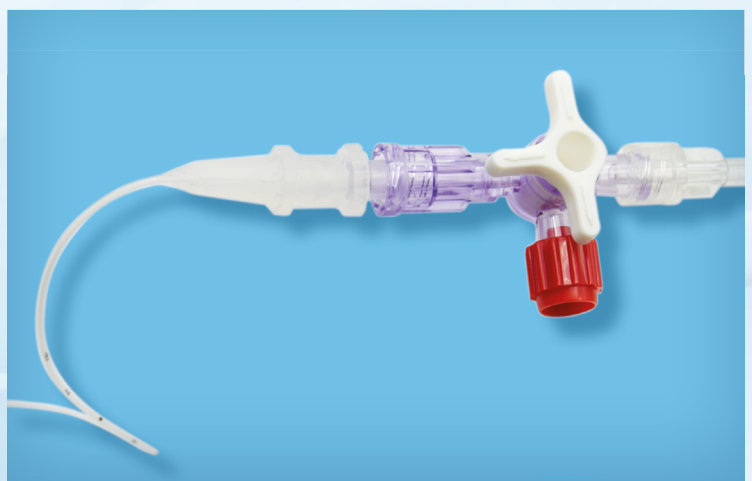

Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10

Livia 3,5 Fr Harnkatheter-Set



Das Livia Harnkatheterset ist ein geschlossenes Harn-drainagesystem, mit dem bei Neugeborenen und Kindern genaue Urinausscheidungen gemessen werden können. Das Livia Harnkatheter-Set besteht aus einem vormontierten 3,5 Fr Silikon-Harndrainagekatheter, einem Dreiwegehahn für Probenahmезwecke und einer 100-ml-Bürette zur genauen Messung der Urinausscheidung.

Das vorab montierte, sterile und geschlossene System minimiert das Risiko von Infektionen. Der Absperrhahn mit Injektionsstelle ermöglicht die kontaminationsfreie Probenahme im mittleren Strahl. Durch die Verwendung der 100-ml-Sammelbürette kann die Urinausscheidung präzise gemessen werden. Der Silikon-Blasenkatheter ist mit einer weichen, abgerundeten Spitze und einer nicht benetzbaren Oberfläche ausgestattet, um Traumata beim Einführen zu reduzieren. Das biokompatible und nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung. Der Katheter ist auch separat erhältlich.

Das Set besteht aus:

- Biokompatibler 3,5 Fr Harnkatheter
- Absperrhahn mit latexfreier Injektionsstelle
- 100-ml-Sammelbürette mit Ablasshahn
- 100-ml-Harnauffangbeutel

Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250-Set	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10